

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

➤ **HEINE mini3000®**

Strumenti diagnostici tascabili – ora disponibili con illuminazione LED



La serie HEINE mini 3000[®] – Massima qualità con dimensioni minime

La serie HEINE mini3000 è il migliore esempio della riuscita combinazione tra i dispositivi HEINE di dimensioni standard e il pratico formato degli strumenti tascabili.

PRATICITA' ED ERGONOMIA

Il design ergonomico e compatto e l'alta qualità dei materiali garantiscono praticità di utilizzo e massima sicurezza nella diagnosi degli esami.

PRODOTTO DI QUALITÀ E DESIGN MODERNO

Il moderno design e gli speciali materiali plastici di cui sono composti gli strumenti assicurano solidità pur mantenendo un peso minimo. Massima qualità e durata con dimensioni minime.

OTTICA DI QUALITÀ E ILLUMINAZIONE

Per una diagnosi precisa è fondamentale la perfetta combinazione tra ottiche di alta qualità e adeguata illuminazione. L'ottica genera un'immagine dai contorni assolutamente definiti e priva di distorsioni. Le strutture e i colori sono riprodotti nel modo più naturale possibile. La serie mini3000 offre un perfetto equilibrio tra le ottiche di qualità HEINE e la migliore illuminazione possibile.

Dos tipos de iluminación. Una serie de instrumentos compactos sin igual: HEINE mini 3000[®]

HEINE LED^{HQ}: DEFINIZIONE DI UN NUOVO STANDARD PER L'ILLUMINAZIONE

LA TECNOLOGIA XHL DI HEINE: SEMPRE UNA PIETRA MILIARE

La tecnologia alogena HEINE XHL Xenon è il punto di riferimento per la valutazione di nuove tecnologie luminose. Infatti essa consente la perfetta riproduzione dei colori, grazie alla quale, da decenni, i medici esaminano l'occhio

ed effettuano la diagnosi. Ma oggi c'è qualcosa che non è affatto da meno: la nostra nuova tecnologia a LED. Perciò rimettiamo la scelta ai nostri clienti: la tecnologia XHL ormai familiare e consolidata o la nuova tecnologia a LED.

HEINE LED^{HQ}: La luce che mostra i colori proprio come sono

Le lampade LED si distinguono per una lunga durata operativa ed un'elevata efficienza energetica. Per questo non è più necessaria la sostituzione delle lampade. La qualità dell'illuminazione LED può tuttavia presentare grandi differenze rispetto all'illuminazione XHL. La tecnologia unica HEINE LED^{HQ} offre tutti i vantaggi della tradizionale tecnologia LED, garantendo anche lo stesso comfort luminoso di una lampada XHL. Tali vantaggi sono ottenuti grazie ad una fedele Indice di resa cromatica (IRC) pari a 95 (il rosso è rosso, il blu è blu).

ILLUMINAZIONE CHIARA ED OMOGENEA

FEDELE RIPRODUZIONE DEI COLORI

Temperatura di colore: 4000K, Indice di resa cromatica (IRC): standard >95, indice specifico per il colore rosso (R9) >90 su una scala massima di 100.

LUMINOSITÀ E PRESTAZIONI COSTANTI

per tutta la durata operativa fino a 50.000 ore.

EFFICIENZA

Durata di funzionamento fino a 10 ore.



OTOSCOPIO HEINE mini 3000® a F.O.

Otoscopio tascabile compatto con luce intensa.



Finestrella di visione integrata con lente orientabile lateralmente con ingrandimento 3x

Struttura interna della testa nero

Funzionamento dello strumento con una sola mano, per una maggiore flessibilità durante gli esami

illuminazione distale a fibra ottica. Per un'illuminazione assolutamente chiara del condotto uditivo e del timpano.

illuminazione XHL o LEDHQ per una resa dei colori ottimale, garantisce la diagnosi più accurata

Clip con interruttore integrato accesso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino. 20.000 accensioni garantite.

Due opzioni di alimentazione: batterie AA monouso o con manici ricaricabili HEINE mini3000 in combinazione con il caricatore da tavolo mini NT.



► Per aggiornare uno strumento a una versione ricaricabile con caricatore da tavolo mini NT si prega di consultare pagina 7.

Otoscopio HEINE mini3000 con illuminazione diretta, prego vedere pag. 6.



Otoscopio HEINE mini3000 F.O. con illuminazione LED o XHL	2,5V XHL	2,5V LED
con manico a batterie mini3000 (con batterie), con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm	D-001.70.110	D-008.70.110

Per ordini o maggiori informazioni si prega di contattare uno dei distributori autorizzati HEINE o visitare il www.heine.com

OFTALMOSCOPIO HEINE mini 3000®

Oftalmoscopio tascabile compatto con la migliore resa cromatica e dimensioni minime.

18 lenti in un range da -20D a +20D

Diaframmi mini3000



Stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, semicerchio, filtro verde

Funzionamento dello strumento con una sola mano, per una maggiore flessibilità durante gli esami



Ottica di qualità per immagini chiare e nitide

Illuminazione XHL o LED per immagine luminosa e autentica resa cromatica

Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino. 20.000 accensioni garantite.

Due opzioni di alimentazione: batterie AA monouso o con manici ricaricabili HEINE mini3000 in combinazione con il caricatore da tavolo mini NT.



▶ Per aggiornare uno strumento a una versione ricaricabile con caricatore da tavolo mini NT si prega di consultare pagina 7.



Oftalmoscopio HEINE mini 3000 con illuminazione LED o XHL	2,5V XHL	2,5V LED
con manico a batterie mini3000 (con batterie)	D-001.71.120	D-008.71.120

Per ordini o maggiori informazioni si prega di contattare uno dei distributori autorizzati HEINE o visitare il www.heine.com

DERMATOSCOPIO HEINE mini 3000®

Dermatoscopio in formato tascabile per un'illuminazione omogenea con autentica resa cromatica.

Il sistema ottico acromatico di alta qualità e di colore neutro fornisce un'immagine nitida e priva di distorsioni ingrandita di 10 volte



Illuminazione XHL o LEDHQ per immagine luminosa e autentica resa cromatica

Clip con interruttore integrato accesso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino. 20.000 accensioni garantite.

Funzionamento dello strumento con una sola mano, per una maggiore flessibilità durante gli esami

Due opzioni di alimentazione: batterie AA monouso o con manici ricaricabili HEINE mini3000 in combinazione con il caricatore da tavolo mini NT.

► Per aggiornare uno strumento a una versione ricaricabile con caricatore da tavolo mini NT si prega di consultare pagina 7.



Dermatoscopio HEINE mini3000 con illuminazione LED o XHL	2,5V XHL	2,5V LED
manico a batterie mini3000 (con batterie), piastrina di contatto senza scala, 10ml di olio per dermatoscopia	D-001.78.107	D-008.78.107

Per ordini o maggiori informazioni si prega di contattare uno dei distributori autorizzati HEINE o visitare il www.heine.com




Altri prodotti della nostra serie mini 3000®:

OTOSCOPIO HEINE mini 3000 [01]

L'otoscopio
più popolare
nella nostra
serie
mini 3000

- Otoscopio compatto con illuminazione diretta XHL

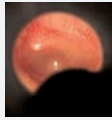

Finestrella di visione integrata con lente orientabile lateralmente con ingrandimento 3x



Struttura interna della testa nero

Illuminazione chiara e omogenea con autentica resa cromatica

D-001.70.210

Otoscopio mini 3000
con manico a batterie mini 3000,
con cadauno 5 speculum monouso
Ø 2,5 e 4 mm

COMBI LAMP mini 3000 [02]

- Lampada multifunzionale compatta. Lampada tascabile e porta-abbassalingua allo stesso tempo.
- Illuminazione chiara ottimale per il test di riflesso pupillare.
- Utilizzabile con abbassalingua in legno standard e monouso HEINE.

D-001.76.120

Combi Lamp mini 3000
con manico a batterie mini 3000 (con batterie) e con 5 abbassalingua monouso

PORTA-ABBASSALINGUA mini 3000 [03]

- Porta-abbassalingua con espulsore per abbassalingua monouso HEINE.
- Illuminazione ottimale della cavità oro-faringea.
- Con espulsore dell'abbassalingua. Evita il contatto dopo l'uso.
- Solida costruzione in metallo. Robusto e di lunga durata.

D-001.74.118

Porta-Abbassalingua mini 3000
con manico a batterie mini 3000 (con batterie) e 5 abbassalingua monouso



**CLIP LAMP mini3000 [04]/
CLIP LAMP mini-c [05]**

- Apparecchio multiuso versatile in due dimensioni: Formato compatto, batterie AA [04] e molto compatto, batterie AAA [05].
- Illuminazione chiara ottimale per il test di riflesso pupillare.
- Illuminatore auricolare per otoplastica opzionale: per l'adattamento di un apparecchio acustico la lampada a clip può essere provvista di un illuminatore auricolare.

D-001.73.131

Clip Lamp mini3000
completa di manico a batterie mini3000 (con batterie)

D-001.73.109

Clip Lamp mini-c
(con batterie)

**ILUMINADOR AURICULAR
per CLIP LAMP mini3000 /
CLIP LAMP mini-c [06]**

- Illuminatore auricolare per otoplastica.
- L'illuminatore è usato per assicurare il corretto posizionamento dell'apparecchio acustico.

D-000.73.105

**Illuminador Auricolare per
Clip Lamp mini3000 /
Clip Lamp mini-c**
confezione blister da 6 pezzi

**CARICATORE DA TAVOLO
mini NT per 2 MANICI
mini3000 [07]**

- Posizionamento stabile degli strumenti. Ad ingombro ridotto.
- Due comparti di ricarica indipendenti. Due manici possono essere caricati nello stesso momento.
- Carica veloce. Tempo di carica 4 ore.
- Nessun rischio di sovraccarica. Il caricatore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica.
- Indicatore dello stato di carica. La luce lampeggia dal comparto di carica per confermare il caricamento in corso. L'accensione della luce fissa segnala che il processo di ricarica è terminato.

X-001.99.484

Caricatore da tavolo mini NT
solo

**MANICO A BATTERIE
HEINE mini3000 [08]**

- Pregiata struttura in lega al cromo e materiale plastico. Antiurto, robusta, a presa sicura.
- Elegante forma ergonomica. Maneggevole.
- Parte di raccordo in metallo. Resistente all'usura.
- Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino. 20000 accensioni garantite. Sistema di caricamento riconfigurabile in ogni momento.

D-001.79.022

**Manico a Batterie
HEINE mini3000**
con batteria ricaricabile NiMH 2Z e base-chiusura

Tutti gli strumenti mini3000 a batterie AA possono essere aggiornati a un sistema ricaricabile 2,5V grazie al set con caricatore da tavolo mini NT composto da: caricatore da tavolo mini NT, 2 batterie ricaricabile NiMH 2Z, 2 basi-chiusura per manici ricaricabili mini3000

X-001.99.485

Per ordini o maggiori informazioni si prega di contattare uno dei distributori autorizzati HEINE o visitare il www.heine.com





HEINE mini 3000® SUCCESSO MONDIALE IN SERIE


Con la serie mini 2000, HEINE è stata la prima nel 1970 a lanciare sul mercato una gamma completa di strumenti diagnostici compatti, continuando ancora oggi ad entusiasmare i medici in tutto il mondo.

La qualità HEINE è un punto fermo a cui si sono affidate completamente generazioni di medici. Per noi innovazione significa precisa osservazione dell'utilizzatore e capacità di semplificare le sue attività quotidiane.

Ogni prodotto HEINE è leader in precisione, design ergonomico e lunga durata e soddisfa gli importanti standard internazionali (ISO/IEC). In continua collaborazione con medici ed università, il centro di ricerca e sviluppo HEINE crea prodotti sempre nuovi.

Fin dalla sua fondazione nel 1946, HEINE è un'impresa indipendente a gestione familiare e fornitore completo di strumenti diagnostici, leader nei mercati internazionali. In tutto il mondo, 500 collaboratori contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

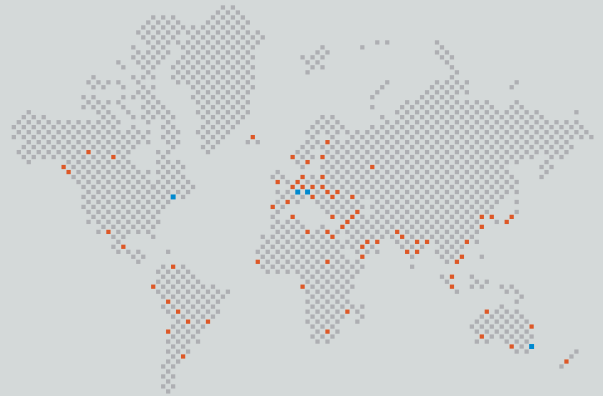

■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

GERMANIA

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© 2016 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.

Distributore Autorizzato

01/17. A-000.00.236 i

